

痛くない針が 気持ちいい。

自分のスタイルで“お好みケア”

いつまでも健康であり続けるためには、身体を動かすことが大切です。

毎日をアクティブに暮らすために、筋肉痛や神経痛の痛みを和らげて、

まずは“動かす”ことから始めてみませんか？

「今日は腰」「明日は膝」…と、お好みのスタイルで。



日本製

希望小売価格
267,840円
(税別 248,000円)

いつまでも健康であり続けるために

シンアツシヨ AC-510

ハイパワー

断続モード

連続モード

メーター

振動間隔調整


振動強弱調整

管理医療機器認証番号: 225AFBZX00071000



“匠の技”を目指した

3つの作用による同時刺激

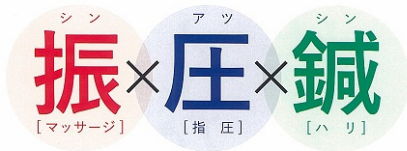

【効能・効果】

あんま、マッサージの代用
一般家庭で使用する

- 疲労回復
- 血行を良くする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

〈シニアツシンのあて方の例〉



販売店

このカタログ内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。
販売店でおわかりにならないときは、シニアツシンサービスセンターにお問い合わせください。

シニアツシン サービスセンター

0120-800-515

受付時間
9:00～18:00
(土・日・祝日は休)


【製造元】コノコ医療電機株式会社
〒142-0054 東京都品川区西中延2-12-13
ホームページ www.shinatsu-shin.com



コノコ医療電機株式会社は、医療機器の品質マネジメントシステムISO13485の認証を取得しています。

シニアツシンの「針」の特長

ポイント1 針は皮膚の表面に刺さりません！

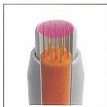


上下にスライドする内筒は適切な位置まで下がりますが12本の針が内筒を越えないよう設計されています。さらに針先端は先く加工されており、皮膚表面を刺したり傷つけたりしないよう安全性の向上を図っています。

ポイント2 電気は流れません！



シニアツシンの先端(針先)は「上下に動く内筒」と「12本の針」で構成されています。この部分が、電動バイブレーターによって上下に微振動し、皮膚表面をリズムカルにたくたく皮膚表面をマッサージ・指圧・鍼の3つの刺激を伝えます。従って、電気は流れたり、電気的な刺激を加えるものではありません。

ポイント3 皮膚表面を盛り上げて刺激します！

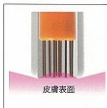

シニアツシンの先端(針先)を皮膚表面に押しあてると、上下する内筒によって押された皮膚が内側にふくれ、真ん中の皮膚が高くなり盛り上がります。ここに針の振動刺激が加えられる仕組みです。

品番: AC-510 ハイパワーモデル

電源	AC100V(50/60Hz)	切替	2種類(連続・断続)
消費電力	6/5W	振動調整	あり(強弱・段階)
重量	約2.9kg	定機時間	30分
外形寸法	幅330mm×奥行290mm×高さ113mm		



安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください

＜警告＞

医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください(例:血栓(血栓)症、重症の脚腫れ(脚)・急性腎臓病(腎)・(前)、各種皮膚炎、皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)

＜注意＞

＝使用する環境及び使用条件は次のことにご注意ください＝

●浴室など湿度の高いところで使用しないでください●湿気時には使用しないでください●汗質に合わない人、金属アレルギーのある人は使用しないでください●交流100V以外で使用しないでください

＝次の方は、必ず医師に相談のうえ使用してください＝

●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内挿込み型電気医療機器を使用している人●動悸しやす(胸痛)のある人●心臓に障害のある人●妊娠初期の不安定期又は出産直後の人●糖尿病などによる皮膚の乾かし(脚)増進増悪からくる知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(発熱)のある人(例:急性炎症症状[けん]熱、悪寒、血圧変動など)の強い時期、発熱している人●骨髄しう(脳)症の人、せきついで(腎)の病、心臓(心)病、肺病などの危険(とう)病(慢性)疾患の人●背骨(背骨)に異常のある人又は背骨が左右に曲がっている人●腫瘍のある人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人

本カタログの記載内容は、2014年4月現在のものです。 AZF10-00019 [510C_1409_3K]